



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## BEIDHÄNDIGE ANWENDUNG

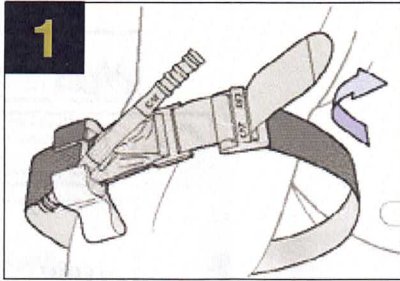


Legen Sie den Gurt um die verletzte Extremität und führen Sie die Spitze durch die Stegschnalle.\*

## EINHÄNDIGE ANWENDUNG

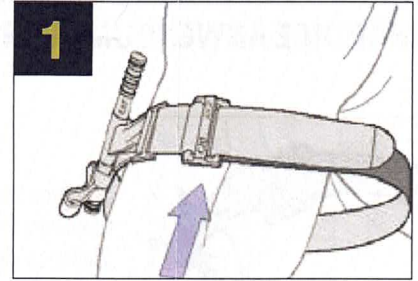


Legen Sie das **CAT** Tourniquet proximal zur Blutungsstelle an. Führen Sie dazu die verletzte Extremität durch die O-förmige Schlaufe des Klettbandes.\*


OR

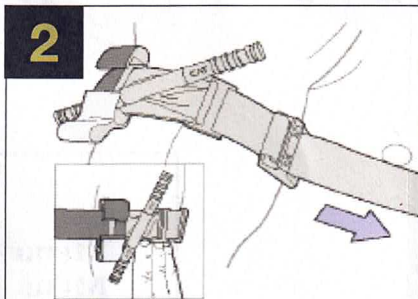


Ziehen Sie den Gurt so fest an, dass es nicht möglich ist, drei (3) Fingerspitzen zwischen **CAT** Tourniquet und Extremität zu bringen. Sollte dies möglich sein, muss der Gurt fester angelegt werden. Sichern Sie diese feste Anlage, indem Sie so viel Klettfläche wie möglich auf Klettfläche bringen und miteinander verstreichen.

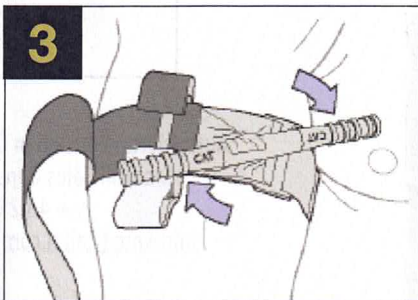

Drehen Sie den Knebel, bis die Blutung stoppt und der distale Puls nicht mehr tastbar ist.

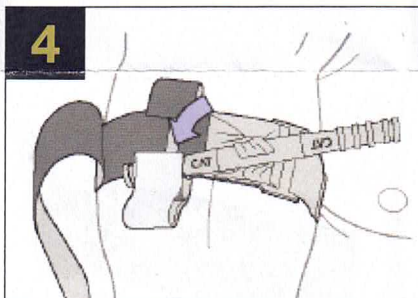

Sichern Sie den Knebel im Klemmhaken. Überprüfen Sie die Blutung und den distalen Puls. Sollte die Blutung nicht aufhören und ist der distale Puls weiterhin tastbar, verstärken Sie die Festigkeit der Abbindung oder legen Sie ein zweites **CAT** Tourniquet proximal neben das erste und überprüfen Sie die Wirksamkeit.

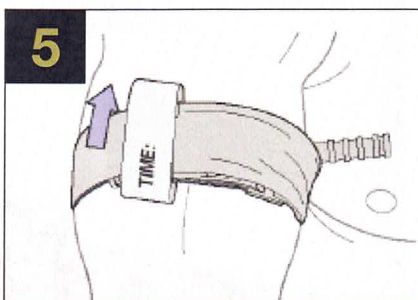

Legen sie den Gurt über den Knebel hinweg zwischen den Klemmhaken hindurch und sichern Sie Knebel und Gurt durch Schließen des Sicherungskletts mit der Aufschrift "TIME:" Dokumentieren Sie auf diesem grauen Sicherungsklett die Applikationszeit des **CAT** Tourniquet.

\* Sollten Sie nicht sicher sein oder steht Ihnen nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, um die genaue Blutungsstelle zu identifizieren, kann situationsabhängig eine effektive Anlage des **CAT** Tourniquet so proximal wie möglich an der Extremität auf der Kleidung erfolgen. Das **CAT** Tourniquet darf NICHT über harten Gegenständen in der Kleidung angelegt werden. Sobald es die Situation erlaubt, sollte die Extremität untersucht werden und das **CAT** neu, proximal der Blutungsstelle, direkt auf der Haut angelegt werden.